


SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

PEMELIHARAAN ALAT DAN BAHAN

PROGRAM STUDI GIZI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

ALUR

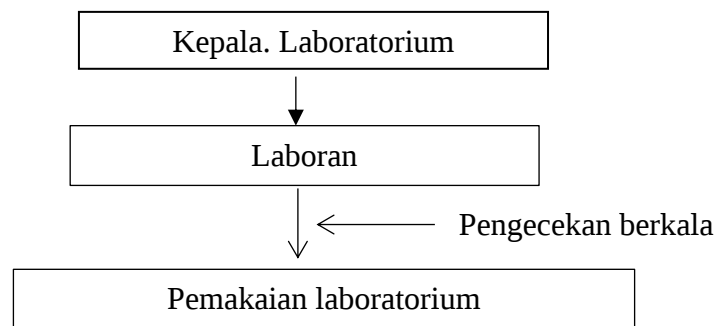

1. Kepala Laboratorium menugaskan kepada laboran untuk melakukan pengecekan ada atau tidaknya alat yang rusak dan kebersihan alat sebelum dan setelah pemakaian laboratorium.
2. Pemeliharaan alat dan bahan dilakukan secara rutin dan berkala.
 - a. Untuk alat yang terbuat dari kaca dari bahan yang tidak mudah korosif menggunakan detergen
 - b. Alat yang terbuat dari Kaca yang berlemak atau terkena noda yang sulit hilang dengan deterjen dapat dibersihkan dengan merendamnya di dalam larutan kalium bikromat 10% dalam asam sulfat pekat.
3. Langkah pemeliharaan alat :
 - a. Menjaga Kebersihan alat dan tempat menyimpan bahan
 - b. Membersihkan peralatan pada waktu tidak digunakan secara berkala dan atau setelah dipergunakan untuk kegiatan praktik
 - c. Mengganti secara berkala untuk bagian-bagian peralatan yang sudah habis masa pakainya
 - d. Mengkalibrasi Alat-alat yang menggunakan skala ukur.
 - e. Pengecekan kompor gas secara rutin setiap akhir semester
 - f. Penyimpanan alat dan bahan disesuaikan dengan kelompok/jenis/karakteristik.